


SA - 7

HORDOZHATÓ SZŰRŐAUDIOMÉTER

Kis méretű, színes, érintőképernyős audiométer, beépített memóriával és számítógépes üzemmóddal.

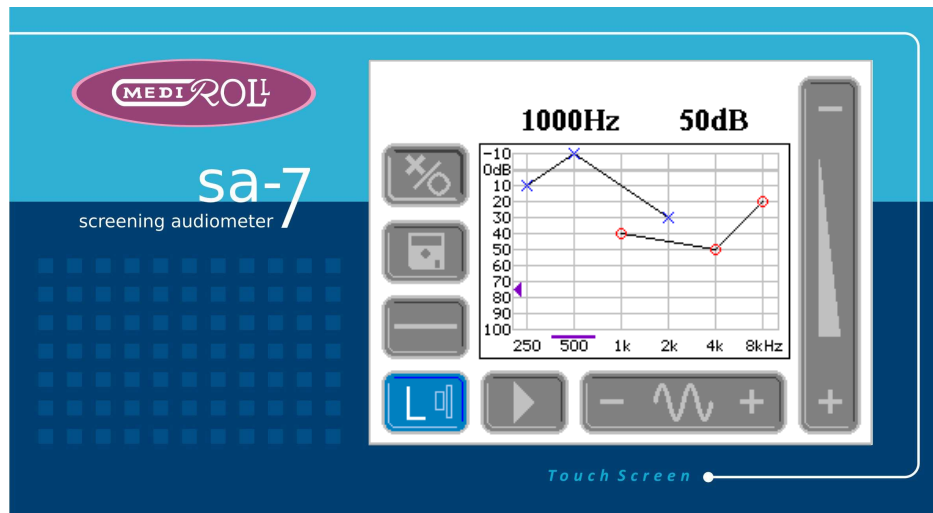

FONTOSABB JELLEMZŐI

- **Színes, grafikus kijelzés**
a 320x240 felbontású (QVGA) kijelző teljes tákékoztatást nyújt a kezelőnek a készülék működéséről és az eredményekről
- **Mozgó érintkezők nélküli felépítés**
érintőképernyő biztosítja a teljesen zajtalan működtetést (érintés vagy csúsztatás)
- **Audiogram megjelenítés**
a mérés során a felvett audiogram azonnal látható a kijelzőn (külön - külön vagy együtt)
- **Paciens visszajelzésén alapuló küszöb felismerés**
a készülék két visszajelzésből (azonos frekvencián és szinten) kifrja a küszöb értéket, amit a kezelő felülbíráthat
- **Zajvédett fejhallgató**
mintegy 20 dB zajcsillapítású hallgató nemcsak ideális környezetben teszi lehetővé a mérést
- **Egyszerű működtetés - kezelés**
a készülék a szűrési eljárás legegyszerűbb változatát is lehetővé teszi
- **Automata mérés**
a kétoldali légvezetéses hallásgörbe a paciens visszajelzései alapján automata üzemmódban is felvehető
- **Dallanteszt kisgyermek vizsgálatához**
nyolc közismert gyermekdal segíti az iskolaérettnél fiatalabb gyermekek vizsgálatát
- **Számítógép csatlakoztatási lehetőség**
a mérési eredmények folyamatosan nyomkövethetőek a monitoron
- **Beépített adattárolás**
50 személy teljes légvezetéses hallásgörbéje a memóriában eltárolható
- **Felhasználói beállítási lehetőség „setup”**
az alkalmazási célnak megfelelően a kezelő átállíthatja a készüléket a legcélszerűbb rutinra

ALKALMAZÁSI KÖR

- Háziorvosi - családorvosi igények.
- Körzeti - rendelőintézeti feladatok.
- Hallókészülék beállítás.
- Munkaalkalmassági - munkavédelmi vizsgálatok
- Csendes-kabinban, vagy azon kívül történő mérések

MŰSZAKI ADATOK

- **Frekvenciák, hangszintek:**

250 Hz	80dB HL
500 Hz	100dB HL
1000 Hz	100dB HL
2000 Hz	100dB HL
3000 Hz	100dB HL
4000 Hz	100dB HL
6000 Hz	100dB HL
8000 Hz	80dB HL

- **Hangmegjelenítés:** folyamatos vagy szaggatott (automatikus vagy kézi szaggatás)
- **Hangszint lépések:** 5 dB
- **Automata küszöb felismerés:** Hughson - Westlake eljárás (IEC 8253-1/89)
- **Hitelesítés:** ISO 389
- **Audiométer szabvány:** IEC 645 4.tip.
- **Memória kapacitás:** 50 paciens teljes (2 fül) légvezetési hallásgörbéje
- **PC kapcsolat:** RS-232 soros vonali csatlakozás
- **Fejhallgató:** TDH 39 (100 Ω)
- **Torzítás:** jobb mint az IEC 645 szabvány előírás THD < 0,5 %
- **Szint- és frekvencia pontosság:** az IEC 645 szabvány szerint (± 3 dB illetve < 1 %)

- **Hálózati adatok:**

Feszültség: 100 – 240 V, 50/60 Hz
Teljesítmény: max. 3 VA

- **Mechanikai adatok:**

Tömege: 0,45 kg
Mérete: 157x92x35 mm

STANDARD TARTOZÉKOK (árban foglaltak)

Hálózati adapter
Zajvédett fejhallgató pár TDH 39
Hordtáska
Használati utasítás

KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

Standard tartozékok többlet példányai
PC csatlakozó kábel + szoftver
Paciens visszajelző kapcsoló

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK (rendelésre)

Akusztikus felülvizsgálat és beállítás, szerviz

GARANCIA: 12 hónap

Gyártja:

MEDIROLL

MEDIROLL Orvostechikai Kft.

H - 4025 DEBRECEN, Postakert u. 10.

☎ (52) 533-737, 533-738 **Fax:** (52) 534-446

E-mail: mediroll@mediroll.hu

Home Page: www.mediroll.hu

