


# TŰMEGSEMMISÍTŐ

## ND - 01

**A LEGNAGYOBB VESZÉLYFORRÁS AZ ÉLES FER-  
TŐZŐ EH. TŰ. AZ ND-01 MEGÓVJA ETTŐL A VE-  
SZÉLYTŐL.**

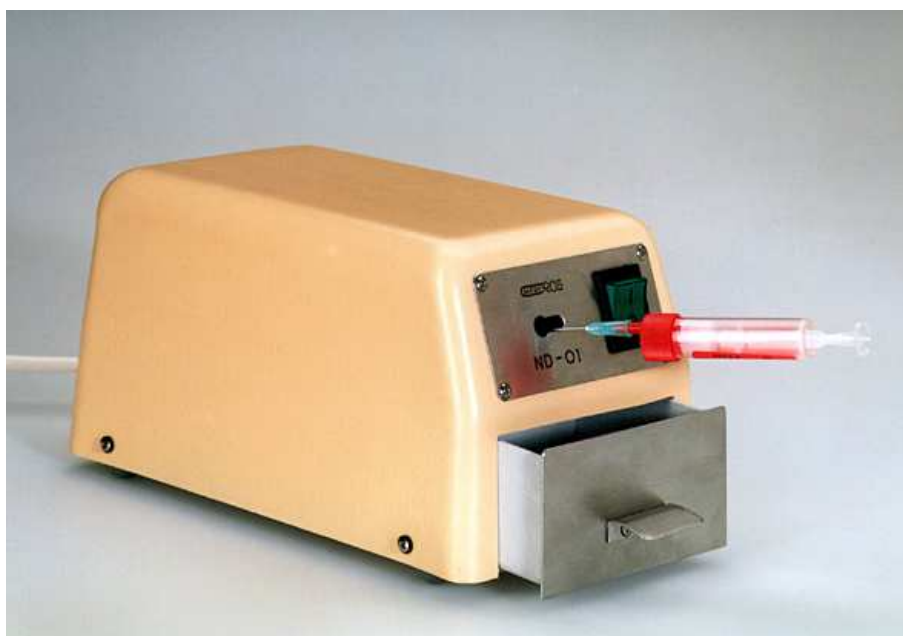

*Gyártja:*

**MEDIROLL**

**MEDIROLL Orvostechikai Kft.**

H - 4025 DEBRECEN, Postakert u. 10.

☎(52) 533-737    **Fax** (52) 534-446

E-mail: [mediroll@mediroll.hu](mailto:mediroll@mediroll.hu)

Home Page: <http://www.mediroll.hu>



# TÚMEGSEMMISÍTŐ

## ND-01

Az **ND-01** alkalmazásával kívánjuk *kiegészíteni* a használt Eh. tűkre előírt megsemmisítési technológiát. Ennek lényege, hogy az injekció beadása után a használt tűt **azonnal "szúrjuk be"** az ND-01-be amely elégeti annak fémrészét. Annak veszélye, hogy az éles, esetleg fertőző tűvel felsértjük kezünket és az közvetlenül a véráramba kerülve fertőz ill., hogy az avatatlan kezekbe kerülve újra felhasználásra kerülhet ezzel megszünt. A megmaradt **"tűroncsot"** helyezzük a már működő technológia szerinti műanyagdobozba amely aztán elégetésre kerül.

### Fő jellemzői:

- Egyszerűen kezelhető.
- Folyamatosan üzemeltethető.
- Változó tűméretek alkalmazhatósága (0-2,2 mm-ig minden tűmérethez alkalmas)

### Alkalmazhatóság:

A folyamatos üzemmódban használható tűmegsemmisítő készülék az általános orvosi gyakorlatban.

### Javasolt alkalmazása:

- körzeti orvosi rendelőkben
- laboratóriumokban
- ambulanciákon
- kórházakban
- humán és állategészségügyben
- fogászati rendelőkben

alkalmazott egyszerűhasználatos műanyag és hagyományos fém tűfejű tűk megsemmisítésére használható.

Kiválóan alkalmazható AIDS - fertőzések és fertőző betegségek kezeléséhez használt tűk megsemmisítésére, újrafelhasználás (narkózáók) megakadályozására.

### Műszaki adatok:

Hálózati feszültség: 230 V; 50 Hz  
Hálózati teljesítmény: 300 VA  
Hálózati biztosíték: T 4 A

Készülék tömege: 3,5 kg

### Külső befoglaló mérete:

szélesség: 140 mm  
magasság: 135 mm  
mélység: 300 mm